




# Goliat Excel



Pedal til nedsænkning af hjul

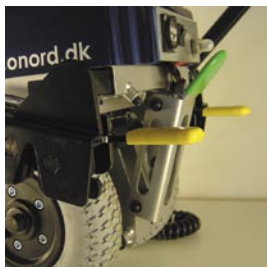

Montagegreb



Håndstyringens betjenings-taster



Håndstyring



Kontrolpanel



## Hjælpe motor

Goliat Excel er en lille stærk hjælpe motor til påspænding på kørestolen.

Goliat Excel er til stor hjælp for den person, der skubber kørestolen, idet Goliat Excel også er udstyret med baggear. Goliat Excel betjenes via en styring, der monteres på skub-behåndtagene.

Markedets letteste montering

Passer til næsten alle krydsrammestole med SB 38-62 cm, kontakt os for yderligere information

Styring med display

Støddæmpning via gasaffjedring

Kan klare stigninger på op til 20% uden at miste kraft

Meget stærk motor

Goliat Excel klarer brugervægt op til 180 kg på jævnt terræn

### Tekniske data Goliat Excel HMI nr. 40442

Bredde	32-44 cm	Motor	200 Watt
Højde i fronten	31,5 cm	Batterier	12V/12Ah (x2)
Længde	42 cm	Rækkevidde	16 km
Hjulstørrelse	200x50 mm	Hastighed	5 km/t
Forhjul	3"	Vægt ekskl. batteri	13 kg

Der tages forbehold for tekniske ændringer.

