



Medico Nord A/S

P3 Knallert P3 Magnum

- frihed og stil



Medico Nord A/S

Dybdalvej 11 • Gudumholm • DK-9280 Storvorde • tel. +45 98 31 69 66 • fax. +45 98 31 69 22
email@mediconord.dk • www.mediconord.dk

P3 Knallert

Med den nye generation af trehjulede knallerter fra Medico Nord A/S er du godt kørende.

P3 er et ingeniøruviklet koncept. Udviklet ud fra tre nøgleord:

sikkerhed, design og kvalitet.

Fremtidens krav om øget handlefrihed, større mobilitet og individuelle tilpasninger er faktorer, som en P3 knallert kan opfylde.

P3 er en benzindrevet PGO knallert, der med sin maksimalhastighed på 30 km/t kan komme vidt omkring. Sikkerheden er i top, og selv den mindste detalje har haft afgørende betydning for knallertens design.

P3 er konstrueret af originale standard reservedele og kan således serviceres ved den lokale PGO forhandler.



Standardudstyr

- Skivebremser på alle hjul
- Affjedring for og bag
- El-start
- El-choker
- Dobbelt for- og baglygter
- Blinklys
- Sidespejle
- P-bremse
- Træk på begge baghjul via differentiale. Dette er for at sikre optimalt vejgreb, i særdeleshed i glat føre. Endvidere er bagskærme udført i ABS plast der tåler mindre påkørsler.

P3 Knallert



Kontrolpanelet er overskueligt og selv i mørke, er instrumenterne tydelige vha. natbelysning. Instrumenterne viser hastighed og tankindhold, indikator for strøm og oliemangel samt blink- og fjernlys



Under sædet er en praktisk opbevaringsboks. Under kørsel kan den benyttes til varer. Ved parkering til opbevaring af styrthjelm etc.



P3's affjedring er i top. Selv under kørsel på ujævnt terræn er sikkerhed og komfort optimal. Ved brugervægt over 90 kg anbefaler vi montering af forstærkningssæt - fåes som tilbehør



Styrets betjeningsgreb er overskuelige og let betjente. Styrkontakter, såsom elstart, blinklys, kørellys og horn er lette at betjene, selv med svage fingre. Gashåndtaget kan som tilbehør tilbydes venstrebetjent



P3 er monteret med hydrauliske skivebremser på alle tre hjul. Bremsefunktionen betjenes med få kræfter vha. håndbremser. Bremsesikkerheden er således helt i top



De dobbelte forlygter giver et perfekt kørellys. Endvidere er P3's front smart designet



P-bremse er monteret ved venstre greb. Bremsen hindrer knallerten i at rulle under på- og afstigning eller ved parkering på skrånende terræn

P3 Magnum

P3 Magnum har de samme egenskaber som P3 Knallert.
Designet er anderledes og større.
P3 Magnum tilgodeser høje personer, der har brug for mere
benplads samt personer med høj brugervægt.



Standardudstyr

- Skivebremser på alle hjul
- Affjedring for og bag
- El-start
- El-choker
- Dobbelt for- og baglygter
- Blinklys
- Sidespejle
- P-bremse
- Magnesiumfælge
- Åbent handskerum
- Digitalt ur
- Omdrejningstæller
- Træk på begge baghjul via differentiale. Dette er for at sikre optimalt vejgreb, i særdeleshed i glat føre. Endvidere er bagskærme udført i ABS plast der tåler mindre påkørsler.

P3 Magnum



Under sædet er en praktisk opbevaringsboks. Under kørsel kan den benyttes til varer. Ved parkering til opbevaring af styrthjelm etc.



P3 er monteret med hydrauliske skivebremser på alle tre hjul. Bremsefunktionen betjenes med få kræfter vha. håndbremser. Bremsesikkerheden er således helt i top



P3's affjedring er i top. Selv under kørsel på ujævnt terræn er sikkerhed og komfort optimal. Ved brugervægt over 90 kg anbefaler vi montering af forstærknings sæt - fåes som tilbehør



Styrets betjeningsgreb er overskuelige og let betjente. Gashåndtaget kan som tilbehør tilbydes venstrebetjent



Kontrolpanelet er overskueligt og selv i mørke, er instrumenterne tydelige vha. natbelysning. Styrkontakter, såsom elstart, blinklys, køreslys og horn er lette at betjene. Omdrejningstæller og digitalur er standard på P3 Magnum



De dobbelte forlygter giver et perfekt kørellys. Endvidere er P3 Magnum forsynet med overhalingslys



P-bremse er monteret ved venstre greb. Bremsen hindrer knallerten i at rulle under på- og afstigning eller ved parkering på skrånende terræn

Tilbehør

Tilbehørssortimentet til P3 er omfattende

Efter mottoet:

"hjælpe midlet skal passe til brugeren og ikke omvendt"

bestræber vi dagligt på at imødekomme brugertilpassede løsninger

Specialløsninger omfatter bl.a.

- Kørestolsholdere - faste som svingbare
- Rollatorholder
- Fodstøtter
- Individuel tilpasning af afstand mellem styr og rygstøtte

Tekniske data

se bagsiden

Udover det viste tilbehør kan tilbydes:

Nylongarage

Reparationslak

Lås for skivebremse





Tilbehør



Stokkeholdere tilbydes til henholdvis een eller to stokke



Vindspejl - her illustreret en lille model.



Fodbremse kan monteres til behov hvor den ene af de to håndbetjente bremses ikke lader sig anvende



Forstærkningssæt består af en ekstra fjeder. Forstærkningssættet anbefales til brugere over 90 kg




Kuskeslag beskytter mod vind og regn, og er meget anvendeligt i dagligdagen



Rygstøtten tilbydes med ekstra bredde mellem armlænene



Kurv monteret mellem bag-skærme

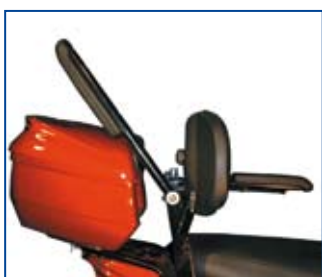

Topboks samt rygstøtte illustreret med det opklappelige armlæn for lettere indstigning



Rygstøtte med armlæn. Giver brugeren god støtte og behagelig siddekomfort



Venstrebetjent gashåndtag



Rygstøtten vises opklappet for at skabe adgang til opbevaringsboksen under sædet



Bakgear aktiveret



Bakgear de-aktiveret

Tekniske data



P3 Knallert

P3 Magnum

Mål	Længde	1890 mm	2040 mm
	Bredde	790 mm	790 mm
	Højde	1110 mm	1150 mm
	Sædehøjde	740 mm	810 mm
	Akselafstand	1345 mm	1445 mm
	Frihøjde	107 mm	107 mm
	Venderadius	2175 mm	3400 mm
Vægt	Tørvægt	110 kg	120 kg
	Lasteevne	120 kg	120 kg
Motor	Type	2,6 hk, 2-takt, blæserkølet	2,6 hk, 2-takt, blæserkølet
EURO2 godkendt	Lyddæmper med indbygget katalysator og lufttilskudssystem		
	Modelnr.	PD30	PD30
	Cylinderantal	1 stk	1 stk
	Slagvolumen	49ccm	49ccm
	Startsystem	Elstart	Elstart
	Smøring	Seperat	Seperat
	Totaktsolie	Motul Scooter Oil	Motul Scooter Oil
El-anlæg	Forlygte	1 stk 12V/18W/18W	12V/18W/18W
	Baglygte	2 stk 12V/5W	12V/5W
	Stoplygte	2 stk 12V/15W	12V/15W
	Blinklys	4 stk 12V/10W	12V/10W
	Speedometerlys	2 stk 12V 1,7W	12V 1,7W
	Kontrollamper	1 stk pr. lampe 12V 1,7W	12V 1,7W
	Tændingssystem	C.D.I.	C.D.I.
	Ladesystem	Svinghjulsmagnet	Svinghjulsmagnet
	Batteri	YT4L-BS 12V 4 Ah	YT4L-BS 12V 4 Ah
Olietype	Motul gearolie HD SAE 80W90		
Oliekapacitet	Oliemængde udskift	110 ccm	110 ccm
	Oliemængde total	130 ccm	130 ccm
Luftfilter		Oliefugtet filter	Oliefugtet filter
Benzin	Benzintype	Blyfri oktan 91-95	Blyfri oktan 91-95
	Tankkapacitet	5,1 liter	6,7 liter
	2-taktolie	1,1 liter	1,1 liter
Tændrør		NGK BPR7HS	NGK BPR7HS
Kobling		Tørkobling Tørkobling	
Gear		Automatisk (V-rem)	Automatisk (V-rem)
Hjul	For	Stålfælg 120/90-10	Magnesiumfælg 120/70-12
	Bag	Stålfælg 130/90-10	Magnesiumfælg 130/70-12
Indstigningshøjde		31 cm	31 cm
Afstand mellem bagskærme		39 cm	39 cm
Benzinforbrug,	afhængig af brugervægt og terrænforhold	20-25 km/l	20-25 km/l
HMI nummer		24939	29209
P3 er godkendt af Færdselsstyrelsen. Typegodkendelse:		PM K103	CP K104

Der tages forbehold for tekniske ændringer



Medico Nord A/S

Dybdalvej 11 • Gudumholm • DK-9280 Storvorde • tel. +45 98 31 69 66 • fax. +45 98 31 69 22
email@mediconord.dk • www.mediconord.dk